





PAUL HARTMANN B.V.
Postbus 26
6500 AA Nijmegen
T 024 372 36 10
F 024 377 82 84
E algemeen@nl.hartmann.info

Wilt u meer weten over HARTMANN?
Bezoek onze website: www.hartmann.info

Productnaam	Producttype	Artikelnummer	Prijseenheid	Verzendeenheid
Foliodress cap Comfort 	Universal, groen	992 465	Doos á 100 stuks	8
	Universal, wit	992 466	Doos á 100 stuks	8
	Astro	992 460	Doos á 100 stuks	6
	Astro Plus	992 461	Doos á 100 stuks	6
	Apart	992 462	Doos á 100 stuks	6
	Rondo	992 463	Doos á 100 stuks	6
	Rondo Plus	992 467	Doos á 100 stuks	6
	Form	992 464	Doos á 100 stuks	6
	Form Plus	992 468	Doos á 60 stuks	6
	Bandana	992 477	Doos á 100 stuks	6
Foliodress cap Fun	Universal	992 474	Doos á 80 stuks	8
	Astro	992 476	Doos á 130 stuks	6
	Form	992 475	Doos á 140 stuks	6
	Bandana	992 470	Doos á 160 stuks	6
Foliodress mask Comfort 	Loop, blauw	992 537	Doos á 50 stuks	10
	Perfect, groen	992 143	Doos á 50 stuks	6
	Senso, groen	992 138	Doos á 50 stuks	6
	Special, groen	992 142	Doos á 50 stuks	6
	Anti-fogging, groen	992 530	Doos á 40 stuks	8
	Anti-splash, groen	992 528	Doos á 40 stuks	6
	Anti-splash + visor, groen	992 529	Doos á 25 stuks	6
Foliodress mask	Perfect, blauw	992 510	Doos á 50 stuks	6
	Senso, blauw	992 509	Doos á 50 stuks	6
	Special, blauw	992 508	Doos á 50 stuks	6
Foliodress mask Respirator	FFP 2, blauw	992 140	Doos á 20 stuks	8
	FFP 3, wit	992 141	Doos á 20 stuks	8
Foliodress eye protect		992 524	Doos á 5 stuks	12

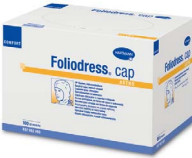

Praktische OK-kleding.
Maskers en mutsen van HARTMANN.



Veiligheid gaat boven alles. Net als comfort.

Voor veeleisend gebruik in de OK.

Het werk in de OK stelt hoge eisen aan zowel mensen als materiaal. OK-kleding moet betrouwbare bescherming bieden tegen infecties, zonder daarbij de gebruiker te hinderen. Dit is met name belangrijk bij het hoofd, want nergens wordt de kleding zo dicht op de huid gedragen als daar.

Veiligheid en comfort hebben daarbij de hoogste prioriteit. Het Foliadress-assortiment van HARTMANN telt een ruime keus aan operatiemaskers, operatiemutsen en persoonlijke beschermingsmiddelen en biedt voor elke gebruiker en elk toepassingsgebied het juiste product. Zo kan het OK-personeel zich concentreren op het belangrijkste: een geslaagde operatie.



Zo voldoen we zowel aan de normen als aan de wensen van de gebruikers.

Betrouwbare bescherming op maat.

EN 14683 – Chirurgische maskers

OK-maskers van HARTMANN voldoen aan de Europese norm EN14683 voor chirurgische maskers. Deze norm specificeert drie belangrijke kenmerken waarover een OK-masker moet beschikken om de veiligheid van de patiënten en de keuze van het juiste masker te waarborgen. De OK-maskers van HARTMANN vallen in de meest veeleisende categorieën type II en bij de anti-splash-varianten type II R en houden daarmee aantoonbaar minstens 98% van alle uitgeademde bacteriën tegen.

1. Bacteriële filtratie-efficiëntie (BFE)

Berekend wordt het aantal besmettelijke kiemen dat door het masker tegengehouden wordt – in verhouding tot het aantal bacteriën dat door het masker heen in de lucht van de OK terecht komt. Dat betekent dat hoe hoger het BFE-percentage is, hoe beter de patiënten beschermd zijn tegen infectie door het OK-personeel.

2. Drukverschil

Hierbij wordt de luchtstroomweerstand van het OK-masker bepaald. Hoe kleiner de ademweerstand, hoe groter het draagcomfort. De lucht wordt langer als fris ervaren en het ademen door het masker is eenvoudiger. Het masker behoudt bovendien langer zijn vorm en rondom het masker kan minder lucht ontsnappen.

3. Spatbescherming

Hierbij wordt de bestendigheid gemeten tegen potentieel infectueuze vloeistoffen. Hoe hoger deze waarde, des te meer bescherming biedt het masker.

	Type I	Type I R	Type II	Type II R
Bacteriële filtratie-efficiëntie (BFE) [%]	> / = 95	> / = 95	> / = 98	> / = 98
Drukverschil (ademweerstand) [Pa]	< 29,4	< 49	< 29,4	< 49
Spatbescherming (bv. bestendigheid tegen bloed) [mm Hg]	niet vereist	> / = 120	niet vereist	> / = 120

EN 149 – Adembeschermingsmaskers

De adembeschermingsmaskers Foliadress mask Respirators van HARTMANN voldoen aan de Europese norm EN149 voor adembeschermingsmiddelen – halve maskers met deeltjesfilter en kunnen daardoor gebruikt worden als persoonlijke beschermingsmiddelen. De eisen van de norm zijn hoog – en onze adembeschermingsmaskers vallen uitsluitend onder de strengste beschermingsklassen FFP 2 en FFP 3.

	FFP 1	FFP 2	FFP 3
Deeltjesfiltratie (FFP*)	> / = 80 %	> / = 94 %	> / = 99 %

* Filtering Facepiece Particle

Zichtbare bescherming tegen onzichtbare kiemen. Foliodress® mask van HARTMANN.

Het Foliodress mask-assortiment biedt patiënten en gebruikers betrouwbare bescherming tegen infecties die door ademdruppeltjes overgedragen kunnen worden. OK-maskers worden met name gebruikt in de OK, op de intensive care, infectieafdelingen en op de kraamafdeling, met name bij prematuren en pasgeborenen.

Het materiaal

- Meerlagig synthetisch materiaal:
 - 1e laag: beschermlaag van het filter
 - 2e laag: speciaal microfilter van fijne kunststofvezels
 - 3e laag: zachte binnenlaag ter bescherming van de huid
 - 4e laag (bij type II R): spatbestendige laag
- Hypoallergeen en vrij van natuurlatex
- Optimale buitenlaag bij Foliodress mask Comfort Perfect en Special

Veiligheid en comfort

- Geïntegreerd, lang en zacht gevoerd neusstuk
- Veilige pasvorm, eenvoudig aan te passen
- Minimale ademweerstand
- Zacht en slijtvast materiaal
- Ook geschikt voor de gevoelige huid
- Geurneutraal
- Breed assortiment dus voor iedereen de juiste keus



Loop

Het masker wordt met zachte, elastische lussen achter de oren bevestigd. Ideaal voor kortdurend gebruik, bv, door bezoekers.



NIEUW: Anti-fogging

Een speciale band aan de bovenkant van het masker voorkomt dat brillen beslaan.



Perfect

Standaard masker met ultrasoon aan elkaar gelaste delen, voor de normaal gevoelige huid.



NIEUW: Anti-splash

Vierlagig spatbestendig OK-masker (type II R) dat de gebruiker beschermt tegen eventuele afscheiding of bloedspatten van wonden of spoelbehandelingen.



Senso

De zachte binnenlaag maakt dit masker ideaal voor mensen met een extreem gevoelige huid.



NIEUW: Anti-splash + visor

Vierlagig spatbestendig OK-masker (type II R) met geïntegreerd vizier dat de ogen beschermt tegen spatten van wonden of spoelbehandelingen. Met geïntegreerde band tegen beslaan.



Special

Door de extra brede pasvorm is dit masker geschikt voor mannen met baard en mensen met een groter hoofd. Met gevoerd neusstuk en genaaide koordjes.

Ook aan de hoogste eisen wordt voldaan.

Adembeschermingsmaskers en beschermende brillen.

NIEUW: Extra bescherming voor gebruikers

Foliodress mask Respirators zijn halve maskers met deeltjesfilter volgens EN 149. Ze beschermen de gebruiker tegen vloeistofdruppeltjes (aërosolen) en vaste deeltjes tot een afmeting van een micron. De adembeschermingsmaskers van HARTMANN voldoen aan de hoge veiligheids-eisen op bijvoorbeeld infectieafdelingen of bij epidemiegevaar en bieden zo zowel patiënt als gebruiker bescherming in de OK.

Het materiaal

Optimale bescherming tegen infecties door innovatieve filterwerking:

1. Buitenste laag beschermt het filter
2. Voorfilter ter bescherming tegen grove vaste of vloeibare deeltjes
3. Meerlagig fijn filter met tweevoudige werking:
 - mechanische filtering van vaste en vloeibare kleine deeltjes tot een afmeting van één micron
 - extra filterwerking door elektrostatische aantrekking van de deeltjes
4. Extra zachte binnenlaag ter bescherming van de huid

Veiligheid en comfort

- Verkrijgbaar met twee filterniveaus: FFP 2 en FFP 3
- Flexibele maskerrand past zich optimaal aan aan het gezicht
- Veilige afscherming van mond en neus
- Zachte elastische koordjes voor snelle bevestiging
- Flexibel neusstuk voor individuele pasvorm
- Eenvoudig in gebruik



NIEUW: Extra bescherming voor de ogen

Foliodress eye protect is een herbruikbare beschermingsbril die een perfecte aanvulling vormt op de maskers en mutsen van Foliodress. De panoramaglaz van gehard polycarbonaat beschermen de ogen tegen potentieel infectueuze vloeistoffen of losse deeltjes.



Veiligheid en comfort

- Persoonlijk beschermingsmiddel klasse II volgens EN 166 voor persoonlijke oogbeschermingsmiddelen
- Herbruikbaar, minstens 10 keer
- Glazen voorzien van laag tegen beslaan, met geïntegreerde zijkanalen
- Stabiel en veilig door anatomische pasvorm
- Individueel verstelbare beugel

Met huid en haar beschermd. Foliodress® cap van HARTMANN.

Het Foliodress cap-assortiment beschermt patiënten tegen infecties die overgedragen kunnen worden via huiddeeltjes of haren. OK-mutsen worden met name gebruikt in de OK, op de intensive care, infectieafdelingen en op de kraamafdeling, met name bij prematuren en pasgeborenen.

Het materiaal

- Nieuw, volledig deeltjesdicht viscosemateriaal zonder perforering
- Huidvriendelijk en ademend synthetisch materiaal
- Kleur en design afgestemd op het Foliodress-assortiment
- Model "Universal" en "Fun"-varianten van ademend polypropyleen

Veiligheid en comfort

- Optimale bescherming tegen infecties
- Hoog draagcomfort
- Optimale warmteregulatie
- De praktische pasvorm en zorgvuldig verwerkte naden zorgen dat de muts ook na meerdere uren nog prettig zit
- Aantrekkelijke kleuren en modieuze varianten



Universal

Universele baretmuts met band van zacht rubber. Zeer licht en aangenaam te dragen. Ook geschikt als hoofdbedekking voor patiënten. In groen en wit.



Astro

Volledige muts in helmvorm met lange kinbanden. Veilige bedekking van hele hoofd en hals. Met name geschikt voor mannen met baard.



Apart

Met strook over het voorhoofd en bandjes om samen te binden in de nek. Geschikt voor lang haar.



Astro Plus

Volledige muts in helmvorm met geïntegreerde en nu vergrote zweetband over het voorhoofd en lange kinbanden. Veilige bedekking van het hele hoofd en hals.



Form

Met voorgevormd nekdeel en rubberen band. Geschikt voor lang haar.



Rondo

Ronde vorm met dubbel versterkte zijpanelen. Zeer licht en praktisch voor korte kapsels.



NIEUW: Form Plus

Geïntegreerde, brede rondlopende zweetband en voorgevormd nekdeel met rubberen band. Geschikt voor lang haar.



NIEUW: Rondo Plus

Naadloos voorhoofd dat eventueel trendy omgeslagen kan worden. Voorgevormd nekdeel met rubberen rand.

Zo mooi kan veilig zijn. De trendy varianten.



NIEUW: Bandana

Trendy piratenmuts om vast te binden in de nek. Zeer licht en praktisch voor korte kapsels.

NIEUW: Fun Universal

Standaard muts met print.

NIEUW: Fun Astro

Muts met koordjes en print

NIEUW: Fun Form

Muts met ruimte voor lang haar en print.

NIEUW: Fun Bandana

Trendy muts met leuke print.

